


Skydda din nya tatuering med Tegaderm Roll

Tegaderm™ är en mycket tunn, transparent och elastisk polyuretanfilm. Filmen används för att skydda den nya tatueringen mot vätskor, bakterier och virus. Tegaderm™ låter huden "andas" och är inte tät som tex plastfolie.

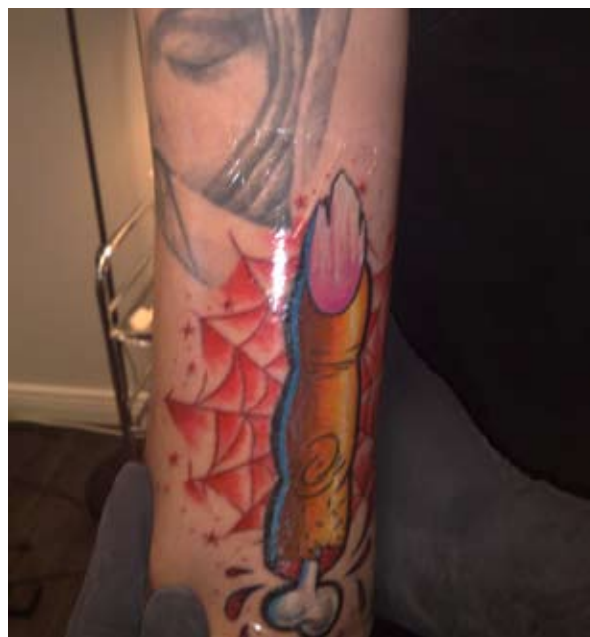

Ett intakt förband skyddar hudområdet mot kontamination utifrån. Man kan duscha med Tegaderm™ då den inte släpper igenom vatten. Man ska dock undvika bada och sola. Den tunna filmen är mycket elastisk och flexibel vilket gör den bekväm att ha på sig.

Appliceringsteknik




1. Se till att hudområdet runt tatueringen är rent och torrt och fritt från Vaseline eller annat som kan påverka vidhäftningen av filmen.



2. Dra ut önskad längd av Tegaderm ur rullen och klipp av



3. Avlägsna den bakre skyddsfilmen, märkt med 1

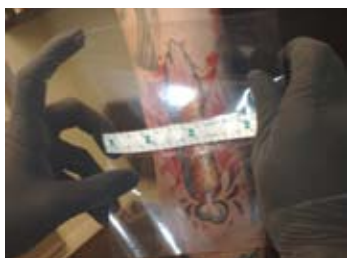

4. Håll förbandet i sidoflikarna och applicera över hudområdet



5. Avlägsna skyddsflikarna på ovansidan av filmen, från mitten och utåt




6. Stryk varsamt med handen över hela filmen och kanterna så den sluter tätt.

Om filmens bredd inte räcker till, kan flera bitar användas och "lappas ihop"


Borttagande av förbandet

Ta tag i kanten av filmen och "stretcha" av förbandet samtidigt som ena handen ger huden stöd.


Genom att stretcha förbandet och expandera materialet underlättar du borttagandet och minimerar slitage på huden.

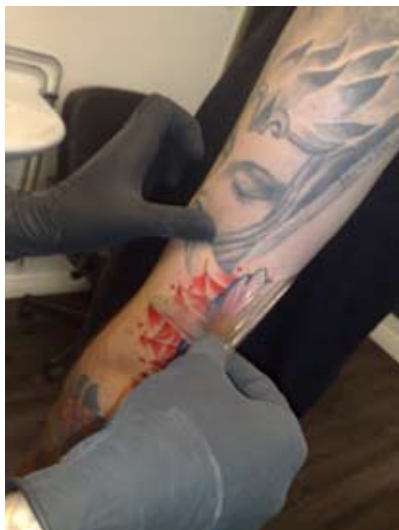

Tegaderm™ låter huden "andas" och är inte tät som tex plastfolie.

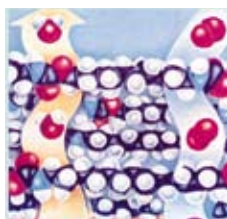

Tegaderm släpper ut fukt från huden och släpper in syre utifrån.

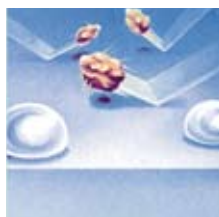

Tegaderm släpper inte igenom bakterier, virus eller vatten.

Beställ från



Beställningsinformation	
3M Art nr	Storlek
16006	15 cm x 10 m

Försiktighet:

Denna produkt är inte steril, ska inte användas på sår där steril omläggning rekommenderas eller infekterad hud.